


LB-BME-538KD/LB-BME-538BKKD

Liste des accessoires du produit

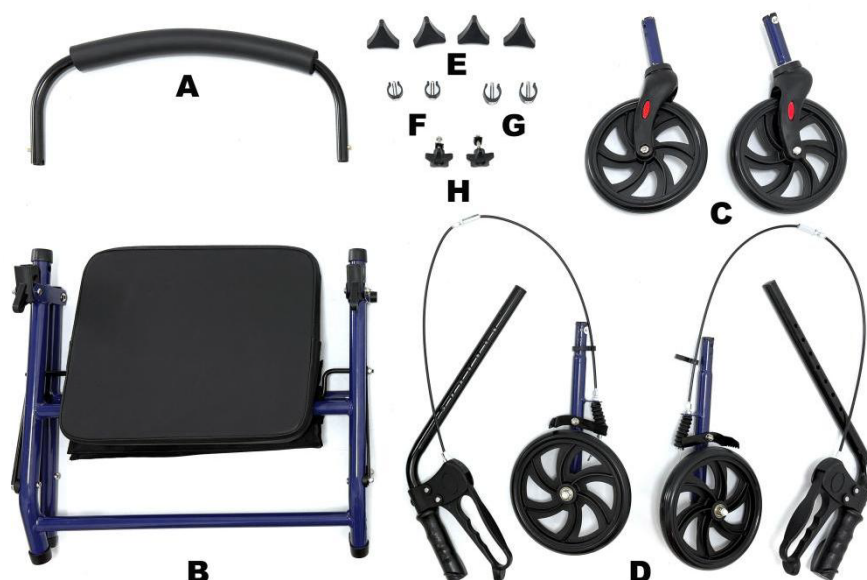

A : Dossier

B : Cadre du déambulateur avec sacoche

C : Roues avant x 2

D : Guidon avec frein x 2

E : Vis triangulaires x 4

F : Goupilles en C (S) x 2

G : Goupilles en C (L) x 2

H : Vis à cinq points avec vis et rondelles incurvées x 2

Précautions importantes


Avant d'utiliser votre déambulateur, vous devez lire et comprendre entièrement toutes les consignes de sécurité suivantes. Ce produit est une aide à la mobilité personnelle. Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves à l'utilisateur ou à d'autres personnes.

Instructions de montage

Premièrement : Déplier le déambulateur



Sortez les composants du déambulateur du carton d'expédition. Ensuite, en position verticale, déployez le déambulateur en appuyant vers le bas sur le support de pliage jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé.

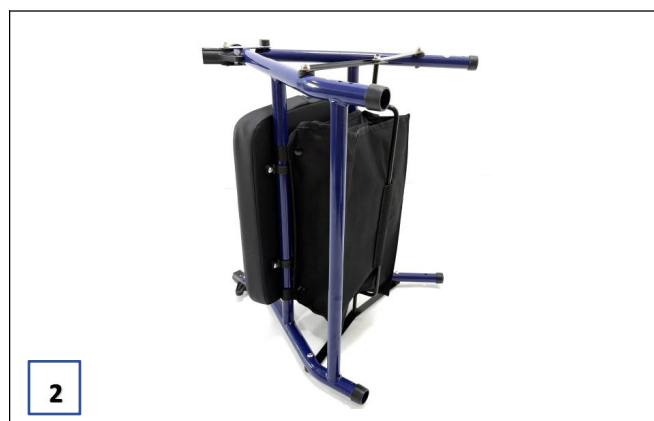

Placez le déambulateur sur le côté.

REMARQUE : Soyez prudent lors du dépliage du déambulateur. Les pièces mobiles peuvent créer des points de pincement pour vos doigts.

Étape 2 : Installer les roues

Roues avant



Fixez les pieds avant sans freins (C) à l'avant du déambulateur (B). Les pieds avant sont marqués '1-1', et le cadre du déambulateur est marqué '1-1'.



Utilisez les goupilles en C (L) (pièce G) pour fixer les pieds avant, puis utilisez la vis triangulaire (pièce E) pour visser les pieds avant.

REMARQUE : Les goupilles en C (pièce G) doivent être entièrement installées et les vis triangulaires (pièce E) doivent être bien serrées.

Roues arrière et freins



Le déambulateur étant toujours couché sur le côté, fixez les roues arrière avec freins (Partie D). Assurez-vous que les roues arrière et le patin de frein se trouvent à l'extérieur du déambulateur et de la poignée de frein (Comme illustré ci-dessus).



Utilisez les goupilles en C (S) (pièce F) pour fixer les pieds arrière, puis utilisez la vis triangulaire (pièce E) pour visser les pieds arrière.

REMARQUE : Les goupilles en C (S) (pièce F) doivent être correctement installées et les vis triangulaires (pièce E) doivent être bien verrouillées.

Du même côté, insérez la poignée de frein dans le cadre et réglez-la à la hauteur souhaitée. Les câbles de frein doivent être à l'extérieur du guidon et du cadre.



Insérez la vis dans le trou hexagonal du cadre. Assurez-vous que la tête de vis soit bien à ras du cadre. À l'autre extrémité de la vis, glissez la rondelle incurvée en vous assurant que le côté incurvé fait face au cadre.



Vissez la poignée à quatre branches. Retournez le déambulateur afin que les roues que vous venez d'installer reposent sur le sol. Ensuite, répétez les étapes 3 à 9 pour l'autre côté.



Enfin, installez le dossier.



Placez le déambulateur à la verticale, les quatre roues au sol. Installez le dossier en veillant à ce que la partie incurvée soit orientée vers l'avant du déambulateur. Enfoncez le dossier dans le châssis jusqu'à ce que les boutons de verrouillage s'engrenent fermement. Inspectez le dossier pour vous assurer qu'il est bien fixé. N'utilisez pas le déambulateur si le dossier n'est pas correctement verrouillé.



Fixez le câble de frein (comme indiqué dans l'image ci-dessus).



Installation terminée. Profitez-en bien !

REMARQUE: Assurez-vous que les poignées sont réglées à la même hauteur et que le sac est bien centré.

Précautions de sécurité

- 1 : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le déambulateur est complètement ouvert, que le siège est abaissé et que la barre de pliage sous le siège est verrouillée en position basse.
- 2 : Vérifiez que les deux boutons de réglage de la hauteur sont bien serrés et réglés à la même hauteur. Testez la stabilité du déambulateur avant d'appuyer de tout votre poids sur les poignées.
- 3 : Testez toujours les freins (verrous à boucle) avant utilisation. Lorsque les freins sont serrés, la barre de verrouillage des roues arrière doit les empêcher de tourner. Si les roues tournent alors que les freins sont serrés, n'utilisez pas le déambulateur. Contactez votre revendeur pour un réglage. Une fois les freins desserrés, les roues doivent tourner librement.
- 4 : Serrez toujours les freins avant de vous asseoir. N'utilisez pas le siège sur une pente ou un sol irrégulier.
- 5 : Remplacez les pneus s'ils sont très usés ou endommagés.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce déambulateur est uniquement une aide à la marche. Il ne doit PAS être utilisé comme moyen de transport. NE LAISSEZ PERSONNE vous pousser lorsque vous êtes assis sur le déambulateur.

Pliage du déambulateur

Trouvez la poignée dans le sac sous le siège.

soulevez la poignée du sac.



Utilisation des Freins

Important : Toujours activer et relâcher les freins des deux côtés simultanément.

1. Pour Ralentir ou s'Arrêter Temporairement (Frein de Service)

Tirez doucement les deux poignées de frein vers le haut, en votre direction. Plus vous tirez, plus le déambulateur ralentira.

2. Pour Verrouiller les Freins (Frein de Stationnement)

Appuyez fermement sur les deux poignées de frein avec vos paumes jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui confirme leur position verrouillée. Vérifiez toujours que les deux freins sont verrouillés avant de vous asseoir.

3. Pour Déverrouiller les Freins

Tirez les deux poignées de frein vers le haut pour les débloquer et les remettre dans leur position initiale (neutre).



Instructions pour régler le système de frein à main

Informations de sécurité importantes

Le système de frein installé sur ce déambulateur répond à toutes les normes de qualité et de sécurité requises. Pour des performances optimales, les freins ont été pré-réglés en usine. Cependant, des réglages peuvent être nécessaires pour s'adapter à vos préférences personnelles ou pour compenser l'usure normale. Vérifiez régulièrement le fonctionnement des freins et ajustez-les si nécessaire en suivant les instructions ci-dessous.

Maintenir fermement en place,
ne pas tourner.

Pour serrer le réglage du frein à main,
" tournez l'écrou dans le sens des
aiguilles d'une montre "

Pour desserrer le réglage du
frein à main, " tournez l'écrou
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre "



Consignes générales de sécurité

Capacité de charge : NE PAS dépasser la capacité de charge maximale de l'utilisateur ni la capacité de charge maximale du sac de rangement, comme indiqué.

Ce produit n'est pas un dispositif de transport : Ce produit n'est PAS un fauteuil roulant. Ne laissez JAMAIS quelqu'un vous pousser lorsque vous êtes assis dans le déambulateur. NE PAS l'utiliser pour transporter des personnes ou des objets lourds.

Posture correcte : Marchez toujours à l'intérieur du cadre du déambulateur, et non derrière. Maintenez votre corps centré entre les poignées pour assurer la stabilité.

Maintien des deux mains sur les poignées : Gardez les deux mains sur les poignées en permanence pour garder le contrôle et accéder aux freins.

Ne pas surcharger : NE PAS suspendre d'objets lourds, de sacs à main ou de sacs aux poignées ou sur le côté du cadre. Cela pourrait rendre le déambulateur instable et le faire basculer.

Attention à l'environnement : Soyez attentif aux dangers potentiels au sol, tels que les bords de tapis, les cordons électriques, les seuils et les déversements.

Sécurité des freins et de l'assise

TOUJOURS VERROUILLER LES FREINS AVANT DE S'ASSEOIR : Avant de vous asseoir sur le siège, serrez les freins de stationnement en appuyant fermement sur les deux leviers jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en position verrouillée. Vérifiez que le déambulateur ne bouge pas.

Asseyez-vous en toute sécurité : Retournez-vous et reculez jusqu'au siège. Utilisez les poignées comme support et abaissez-vous lentement au centre du siège.

Ne pas se propulser : NE JAMAIS tenter de déplacer le déambulateur en le déplaçant avec les pieds en position assise.

Maintenir l'équilibre en position assise : NE PAS se pencher en avant ou sur le côté pour atteindre des objets en position assise, car cela pourrait entraîner une perte d'équilibre et une chute.

Restrictions liées au terrain et à l'environnement

NE JAMAIS utiliser dans des escaliers ou des escalators : Il est strictement interdit d'utiliser ce déambulateur dans des escaliers, des escalators ou des trottoirs roulants.

Prudence sur les pentes : Soyez extrêmement prudent sur les rampes, les pentes et les descentes. Utilisez les freins pour contrôler votre vitesse en descente.

Évitez les surfaces dangereuses : Soyez prudent sur les surfaces mouillées, glissantes ou verglacées. Évitez d'utiliser le déambulateur sur un terrain accidenté, du gravier, des tapis épais ou un sol meuble où les roues peuvent se coincer.

Entretien et maintenance

Nettoyage régulier : Nettoyez régulièrement votre déambulateur avec un chiffon humide et un nettoyeur doux non abrasif. Séchez soigneusement.

Vérification des fixations : Vérifiez mensuellement le serrage de toutes les vis, écrous et boulons.

Réparation par un professionnel : Si une pièce ou un composant, en particulier les freins et les roues, est endommagé, usé ou desserré, cessez immédiatement d'utiliser le déambulateur. Contactez votre revendeur ou un professionnel qualifié pour toute réparation. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.

Nom du produit : Déambulateur

Modèle: LB-BME-538KD/LB-BME-538BKGD

Date de fabrication: 202508

Capacité de poids maximale: 300 lbs/136 kg

Propriétaire de la marque: Shopper+ INC

Adresse du propriétaire de la marque: 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

Email: support@shopperplus.com

Téléphone: 514-631-5216

Fabricant:

Adresse du fabricant: