

LIVING basics

Une marque de **Shopper+**  *Fièremment canadienne*


MANUEL D'INSTRUCTIONS DU BANC DE TRANSFERT POUR BAIGNOIRE

LB-BME-799G3




Remarque : veuillez lire et comprendre tout le contenu
de ce manuel avant d'utiliser ce produit.


À PROPOS DU PRODUIT

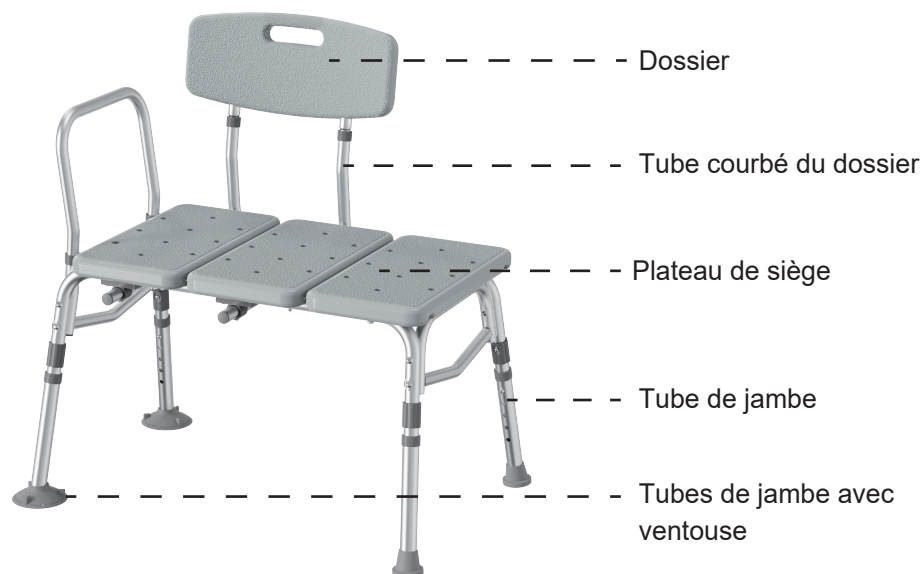


LISTE DE L'EMBALLAGE

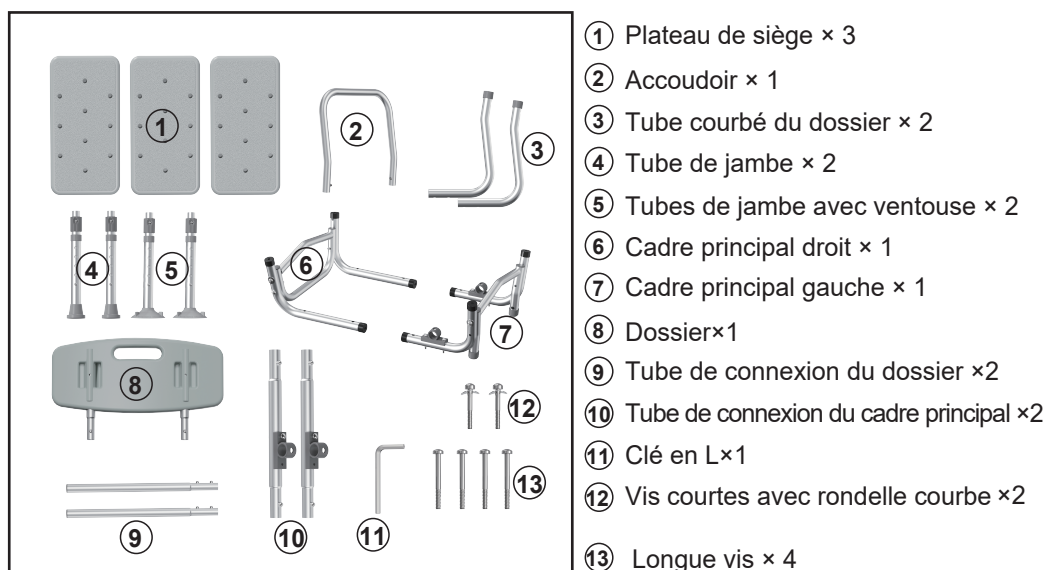


ASSEMBLAGE DU PRODUIT

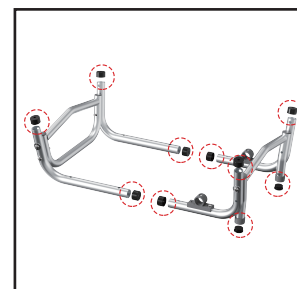


ÉTAPE 1 PRÉPARATION DES CADRES : Retirez les capuchons de protection noirs des ouvertures des tubes des Cadres Principaux Gauche et Droit (6 & 7). Placez les cadres à l'envers sur une surface plane et propre.

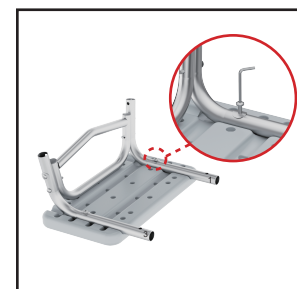


ÉTAPE 2 FIXATION DU PANNEAU GAUCHE : Placez un Panneau de Siège (1) dans les rainures sous le Cadre Principal Gauche (7). Alignez les trous de vis. Utilisez la Clé en L (11) pour le fixer avec les deux Boulons Courts et Rondelles Courbes (12).

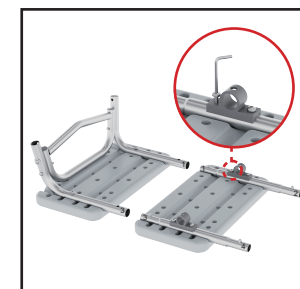


ÉTAPE 3 FIXATION DES CONNECTEURS : Placez les deux Tubes de Connexion Centraux (10) dans les rainures sous le Panneau de Siège central (1). Alignez les trous de vis et utilisez la Clé en L (11) pour les fixer avec les deux Longs Boulons (13).

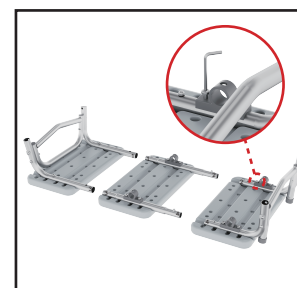


ÉTAPE 4 FIXATION DU PANNEAU DROIT : Placez le dernier Panneau de Siège (1) dans les rainures sous le Cadre Principal Droit (6). Alignez les trous de vis et utilisez la Clé en L (11) pour le fixer avec les deux Longs Boulons (13) restants.

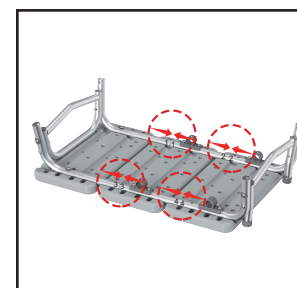


ÉTAPE 5 ASSEMBLAGE DU SIÈGE : Raccordez les trois composants du panneau de siège assemblés ensemble en utilisant les étiquettes numérotées correspondantes. (NOTE : Assurez-vous que tous les Boutons-Poussoirs (Goupilles à Ressort) sortent complètement des trous pour verrouiller solidement les sections.)

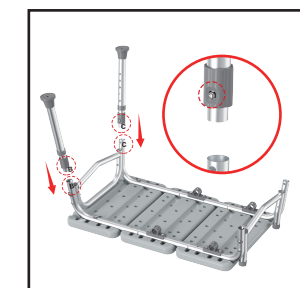


ÉTAPE 6 INSTALLATION DES PIEDS GAUCHES : Insérez les Tubes de Pied Standards (4) dans la partie inférieure du Cadre Principal Gauche, en faisant correspondre les étiquettes lettrées. (Pour l'instant, insérez simplement ; ne réglez pas la hauteur.)

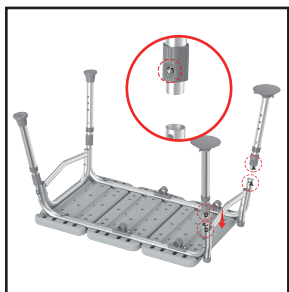


ÉTAPE 7 INSTALLATION DES PIEDS DROITS : Répétez le processus pour fixer les Tubes de Pied à Ventouse (5) à la partie inférieure du Cadre Principal Droit, en faisant correspondre les étiquettes lettrées.

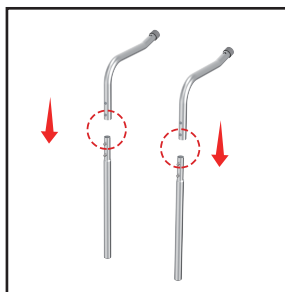

ÉTAPE 8 ASSEMBLAGE DES MONTANTS DE DOSSIER : Insérez les deux Tubes Courbés de Dossier (3) dans les deux Tubes de Connexion de Dossier (9). (NOTE : Assurez-vous que les Boutons-Poussoirs des deux côtés sortent complètement des trous pour les verrouiller.)

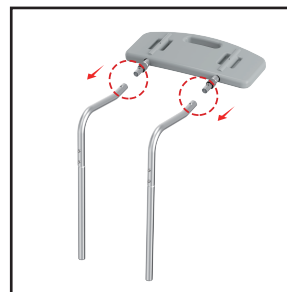

ÉTAPE 9 FIXATION DU PANNEAU DE DOSSIER : Fixez les extrémités opposées des Tubes Courbés de Dossier au Panneau de Dossier (8). (NOTE : Assurez-vous que les Boutons-Poussoirs sortent complètement des trous pour verrouiller le panneau.)

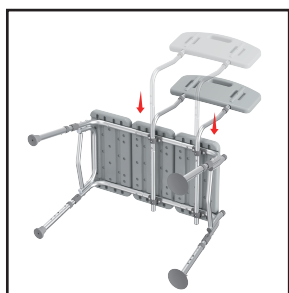

ÉTAPE 10 FIXATION DU DOSSIER : Faites pivoter le cadre principal assemblé de 90° (Côté Droit vers le Haut). Fixez l'Unité de Dossier assemblée à la partie inférieure du cadre principal. (NOTE : Ajustez la distance du dossier en verrouillant un ou deux boutons-poussoirs dans les trous du cadre, selon votre préférence.)



ÉTAPE 11 FIXATION DE L'ACCOUDOIR : Fixez l'Accoudoir (2) sur les côtés du cadre principal. Assurez-vous que le côté courbé de l'accoudoir est orienté vers l'extérieur et que les Boutons-Poussoirs sortent complètement des trous pour le verrouiller.



ÉTAPE 12 RÉGLAGE FINAL DE LA HAUTEUR ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ : Appuyez sur les goupilles et réglez la hauteur des quatre pieds selon votre taille. (VÉRIFICATION CRITIQUE : Assurez-vous que les quatre pieds sont réglés à la MÊME hauteur et que les Boutons-Poussoirs (Goupilles à Ressort) sont complètement sortis et verrouillés dans les trous de réglage avant utilisation.)

I. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.

1. Lecture complète : Vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'assembler ou d'utiliser le produit.
2. Vérification de la stabilité avant utilisation : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit est correctement assemblé et réglé. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées et que le banc ne vacille pas.
3. Confirmation du verrouillage (ESSENTIEL) : Lors du réglage de la hauteur des pieds, vérifiez que les goupilles à ressort (boutons-poussoirs) sont complètement sorties et correctement enclenchées dans les trous de réglage.
4. Surface au sol : Le produit doit être utilisé uniquement sur une surface plane et horizontale.
5. Inspection des pièces : ARRÊTEZ immédiatement l'utilisation si une pièce du produit est endommagée, usée ou desserrée.
6. Entretien : Si les patins ou les ventouses sont usés ou inefficaces, remplacez-les immédiatement.
7. Nettoyage : N'utilisez pas de nettoyeurs corrosifs ou abrasifs puissants sur la surface du produit.

Nom du produit: Banc de transfert de baignoire

Modèle: LB-BME-799G3

Capacité de poids maximale: 300 lbs/136 kg

Propriétaire de la marque: Shopper+ INC

Adresse du propriétaire de la marque: 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

Email: support@shopperplus.com

Téléphone: 514-631-5216

Fabricant:

Adresse du fabricant: