

# LIVING basics

## Foldable Lightweight Wheelchair User Manual



LB-BME-4615

## Warning

1. Practice to use the wheelchair with companion before use.
2. Do not lean backwards in the wheelchair without sway bars.
3. Do not tilt the wheelchair to the right side or left side or lift the wheelchair while using it.
4. Do not brake the wheelchair while the wheel is rolling. If without companion, the user can grip the hand-rim tightly to stop.
5. Do not stand on the plate, which will turn the wheelchair over.
6. Do not modify the wheelchair without our technician's permission. The warranty is not valid in the case of unauthorised modification.
7. Do not use the wheelchair on an escalator.


## Main Components of Transit Chair



# Product Usage

Mobility aid for differently disabled, the sick, the old and the weak., the sick, the old and the weak.

## Quickly unfold

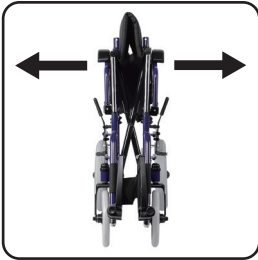

1. Hold the handgrips with two hands and pull them apart.



2. Press down the cushion



3. Lift the backrest up



4. Lock the backrest



5. Unfold the pedals and lock



6. Install the nylon strap

## Warning!

Do not pull the handgrips too hard while unfolding in case of damaging the parts; do not hold the seat tube with fingers while pushing down the cushion in case of pinching your fingers. (Picture 2)



(Picture 2)

## Folding the Wheelchair



1. Untie nylon belt



2. Unlock the buckle, then fold the pedals to the sides




3. Unlock the backrest



4. Fold down the backrest



5. Lift the cushion up

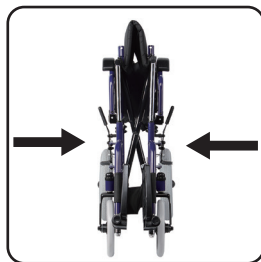


6. Finish folding

## Install the foot plate



1. Put your footplate on the raised metal pieces by aligning it with the holes

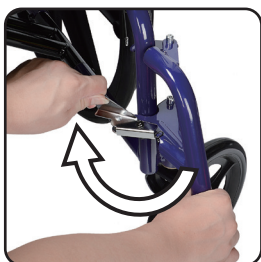

2. Rotate the foot pedal inward and lock



3. Finish

## Install the Anti-tip wheel



Insert the anti-tip wheel into the tail-pipe of the wheelchair.  
Then use the pin to secure the anti-tip wheel.

## Flip up Armrest

Press the plastic lock device and pull up the armrest, then it will flip up



# How to sit down and standing up from a wheelchair?

## Sitting down into a wheelchair

- 1.Lock the brakes on both sides.
- 2.Flip up the foot plates on both sides.
- 3.Hold the arm rests with both hands and slowly sit down into the seat.
- 4.Place feet firmly on the footrests

## Standing up from a wheelchair

- 1.Lock the brakes on both sides.
- 2.Take your feet off the foot plates.Take your feet on the floor.
- 3.Hold the arm rests with both hands and slowly stand up from the seat.



## Note:

Lock the brakes on both sides while getting on or out of



## warning:

Do not step on footplate while getting on or out of .



## Safe Usage of Crossing Obstacles

The companion must hold the handgrip tightly and press the pedal of bottom tube to lift the front castors, then cross the obstacle.

## Wheelchair Transportation

We recommend that you do not sit on your Wheelchair when in a vehicle, but transfer to a vehicle seat. A Wheelchair secured in a vehicle will not provide the equivalent safety level and security as the vehicle's seating systems. However, when transfer is not practical or impossible, ensure the following:

- 1) Check that the vehicle is suitably designed, insured and equipped to transport a passenger seated in a Wheelchair
- 2) Remove any part of the Wheelchair (accessories, etc.) that can be easily detached and store it in the vehicle's luggage hold
- 3) Ensure the Wheelchair is transported in a forward facing direction. Rearward facing is only acceptable if the passenger's head and back can be supported by a suitable bulkhead

## Maintenance

1. Check the bolts of every parts of the wheelchair to see if they are loosen after being used for a period. Tighten the loosen ones to avoid the hidden danger.
2. Add lubricating oil to the moving parts each week in case of inflexibility using.
3. Use soft dry cloth to clean the moisture and the contamination on the wheelchair to avoid the rusting.
4. Keep the cushion and back pad dry and lean to avoid the skin infection.



# Attention

- 1 . The transit chair is used indoor or outdoor flat ground. It is not suitable to use it for a long time on a sloping surface.
2. The brakes are used to stabilize the transit chair while people are sitting in the transit chair, getting off the wheelchair or stopping the wheelchair on an uneven road. Do not brake the wheelchair while the wheelchair is moving. The transit chair might turn over if braking the transit chair when it is moving on a downhill path.
3. Please don't stand or apply force on the footrest while getting on or out of the chair.
4. If the chair doesn't have an anti-roll device installed, please don't incline the back rest in case the fall happens.
5. If you change the direction of the chair in downhill path, it will cause instability and possibly even a fall.

# After-Sale Service

1. If there is any quality problem not caused by intentional actions in one week since the day the product be sold, the company is responsible for return, replacement, repair;
2. Free services will be provided for any quality problem under regular services within the maintenance period

# The following is not covered by warranty:

1. Broken front castors and tyres; broken or split upholstery and armrest.
2. Breakages by improper use.
3. Breakages by unforeseeable natural disasters.
4. Regarding quality problems beyond the warranty period, users should report such to the company who supplied the chair.
5. Our company provide repair of parts with reasonable cost according the invoice and guarantee card. If user can't provide invoice, the maintenance period should be identify as one extra month after manufacture date

# LIVING basics

## Fauteuil Roulant Léger Pliable Manuel Utilisateur




LB-BME-4615

## Attention

1. Entraînez-vous à utiliser le fauteuil roulant avec un compagnon avant de l'utiliser.
2. Ne vous penchez pas en arrière dans le fauteuil sans barres stabilisatrices.
3. N'inclinez pas le fauteuil roulant vers la droite ou la gauche et ne le soulevez pas en l'utilisant.
4. Ne freinez pas le fauteuil roulant pendant que la roue tourne. Si vous n'avez pas le compagnon, vous pouvez saisir fermement les bras du fauteuil pour s'arrêter.
5. Ne vous tenez pas sur la plaque qui renverserait le fauteuil roulant.
6. Ne modifiez pas le fauteuil roulant sans la permission de notre technicien. la garantie ne sera pas valable s'il y a la modification non autorisée.
7. N'utilisez pas le fauteuil roulant sur un escalier roulant.

## Composants principaux du fauteuil roulant

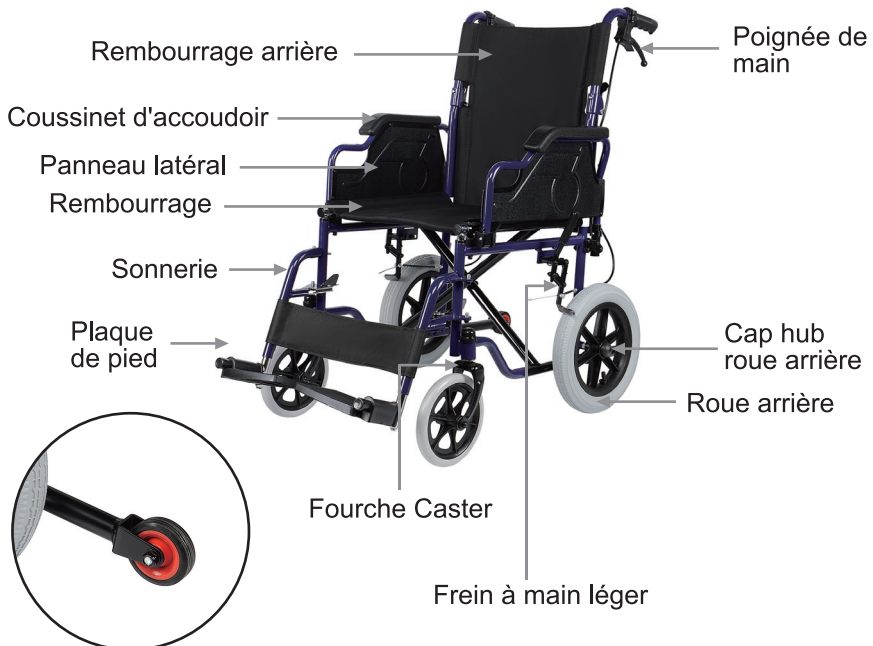


Roue anti-basculement

# Utilisation du produit

Aide de mobilisation pour les handicapés, les malades, les personnes âgées et les personnes faibles.

## Déplier rapidement

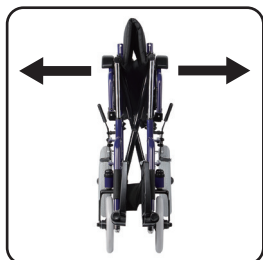

1. Tenez les bras du fauteuil par deux mains et séparez-les.



2. Appuyez sur la housse



3. Soulevez le dossier



4. Verrouillez le dossier



5. Dépliez les pédales et verrouillez



6. Installez la sangle en nylon

## Attention!

Pour éviter d'endommager des pièces, ne tirez pas trop fort sur les poignées lors du déroulement; Pour éviter de pincer les doigts, ne tenez pas le tube de selle avec les doigts lorsque vous poussez le coussin .

(Photo 2)




(Picture 2)

## Plier le fauteuil roulant



1. Détacher la ceinture en nylon

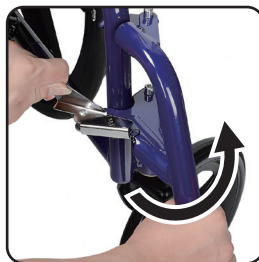

2. Déverrouillez la boucle, puis repliez les pédales sur les côtés




3. Déverrouiller le dossier



4. Rabattez le dossier



5. Soulevez le coussin

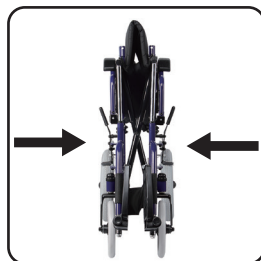

6. Fini

## Installer la plaque de pied



1. Placez votre plaque de pied sur les pièces métalliques surélevées en l'alignant avec les trous.



2. Faites tourner la pédale vers l'intérieur et verrouillez-la



3. Fini


## Installer la roue anti-renversement



Insérez la molette anti-basculement dans le tuyau d'échappement du fauteuil roulant. Utilisez ensuite la goupille pour fixer la molette anti-renversement.

## Relevez l'accoudoir

Appuyez sur le dispositif de verrouillage en plastique et relevez l'accoudoir, et après il se retournera.

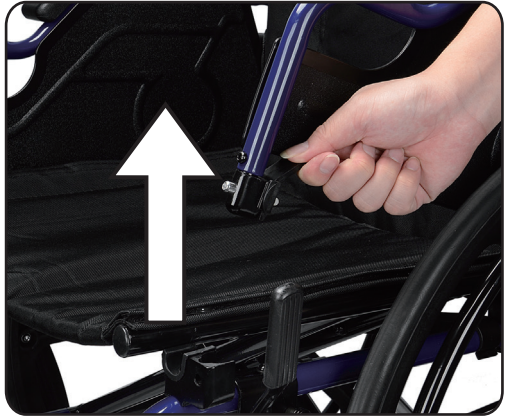

# Comment s'asseoir et se lever d'un fauteuil roulant?

## S'asseoir dans un fauteuil roulant

1. Verrouillez les freins des deux côtés.
2. Faites glisser les plaques de pied des deux côtés.
3. Tenir les bras avec les deux mains et s'asseoir lentement dans le fauteuil.
4. Placez les pieds fermement sur les plaques de pied.

## Se lever d'un fauteuil roulant

1. Verrouillez les freins des deux côtés.
2. Retirez vos pieds des plaques de pied. Prenez vos pieds sur le sol.
3. Tenir les bras avec les deux bras du fauteuil et se lever lentement du siège.



## Remarque:

Verrouillez les freins des deux côtés en montant ou en descendant



## Attention:

Ne pas marcher sur le repose-pied en montant ou en descendant.





# Utilisation sécurisée pour traverser les obstacles

Le compagnon doit tenir fermement la poignée et appuyer sur la pédale du tube inférieur pour soulever les roulettes avant, puis franchir l'obstacle.

## Transport de fauteuil roulant

Nous vous recommandons de ne pas vous asseoir sur votre fauteuil roulant lorsque vous êtes dans un véhicule, mais de le transférer sur un siège de véhicule. Un fauteuil roulant installé dans un véhicule n'offrira pas un niveau de sécurité équivalent à celui des sièges du véhicule. Cependant, lorsque le transfert n'est pas pratique ou impossible, assurez-vous que:

- 1) Vérifier que le véhicule est correctement conçu, assuré et équipé pour transporter un passager assis dans un fauteuil roulant
- 2) Retirez toute partie du fauteuil roulant (accessoires, etc.) pouvant être facilement détachée et rangez-la dans la soute à bagages du véhicule.
- 3) Assurez-vous que le fauteuil roulant est transporté dans une direction orientée vers l'avant. Faire face à l'arrière n'est acceptable que si la tête et le dos du passager peuvent être soutenus par une cloison appropriée

## Entretien

1. Après une période d'utilisation, vérifiez les boulons de chaque partie du fauteuil roulant pour voir s'ils sont desserrés. Serrez ceux qui sont desserrés pour éviter le danger potentiel.
2. Ajoutez de l'huile de lubrification aux pièces mobiles chaque semaine en cas d'inflexibilité.
3. Pour éviter la rouille, utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'humidité et la contamination du fauteuil.
4. Pour éviter l'infection de la peau, gardez le coussin et le coussin dorsal au sec.

## Attention

1. Le fauteuil roulant doit être utilisé sur le terrain plat. Il ne convient pas de l'utiliser longtemps sur une surface en pente.

2. Les freins servent à stabiliser le fauteuil lorsque des personnes assises dans ce fauteuil, veulent descendre du fauteuil roulant ou arrêter le fauteuil roulant sur une route inégale. Ne freinez pas le fauteuil lorsque celui-ci est en mouvement. La fauteuil se retournera si vous la freinez lorsqu'elle se déplace dans une pente descendante.
3. Lorsque vous vous associez au fauteuil, ne vous tenez pas debout et n'appliquez pas de force sur les plaques de pieds.
4. Si le fauteuil n'est pas installé du dispositif anti-roulis, pour éviter la chute, veuillez ne pas incliner le dossier.
5. Changez la direction de la chaise en descente causera instabilité et même une chute.

## Service après-vente

1. Une semaine après le jour de la vente du produit, s'il y a le problème de qualité non causé intentionnellement par des actions intentées, la société est responsable du retour, du remplacement et de la réparation.
2. Des services gratuits seront fournis pour tout problème de qualité dans le cadre des services réguliers pendant la période de maintenance.

## Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie:

1. Roulettes et pneus avant cassés; rembourrage et accoudoir cassés ou fendus.
2. Casses dues à une utilisation inappropriée.
3. Les casses causées par des catastrophes naturelles imprévisibles.
4. En ce qui concerne les problèmes de qualité au-delà de la période de garantie, les utilisateurs doivent en informer l'entreprise qui a fourni le fauteuil.
5. Notre société assure la réparation des pièces à un coût raisonnable selon la facture et la carte de garantie. Si l'utilisateur ne peut pas fournir de facture, la période de maintenance doit être identifiée comme un mois supplémentaire après la date de fabrication.