LIVING basics®

A brand of Shopper+ Proudly Canadian

Une marque de Shopper+ Fièrement canadienne

# ADJUSTABLE HEIGHT SHOWER CHAIR/

# CHAISE DE DOUCHE À HAUTEUR AJUSTABLE

## INSTRUCTION MANUAL / MANUEL D'INSTRUCTIONS

SKU / RÉF : LB-BME-2601




| ENGLISH PAGES: 2-5 | PAGES EN FRANÇAIS: 6-9 |
|---|---|


Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference /
Lisez attentivement ce livret avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future.

# CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

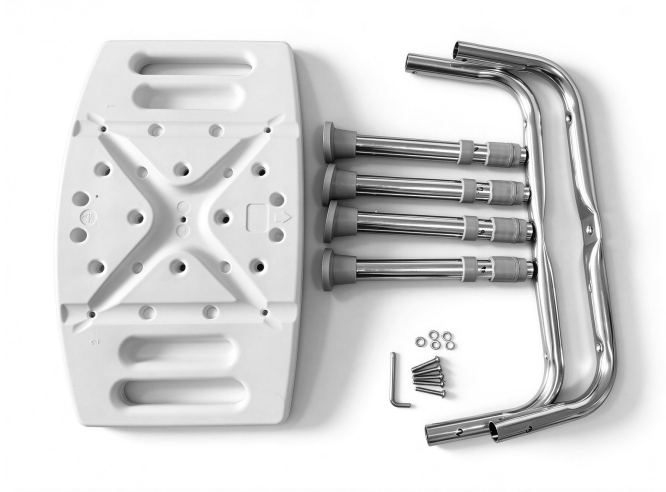
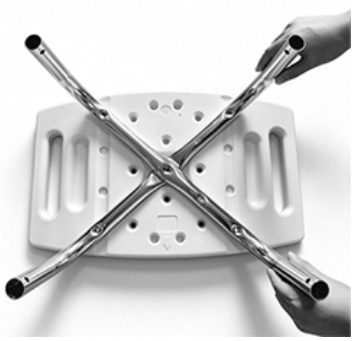
CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES ..... 2
English ..... 3
1. Important Safety Information ..... 3
2. Installation Instructions ..... 3
3. Usage Instructions ..... 4
4. Intended Use ..... 4
5. Maintenance and Care ..... 5
6. Product Specifications ..... 5
7. Warranty Terms ..... 5
8. Contact Information ..... 5
Français ..... 6
1. Informations de Sécurité Importantes ..... 6
3. Instructions d'Utilisation ..... 7
4. Utilisation Prévue ..... 8
5. Entretien et Soins ..... 8
6. Spécifications du Produit ..... 8
7. Conditions de Garantie ..... 9
8. Informations de Contact ..... 9

# English

## 1. Important Safety Information

- **Warning:** This chair is for sitting in the bath or shower only. Avoid using it in other environments.
- **Warning:** Ensure the chair is placed on a flat surface to prevent sliding or tipping.
- **Warning:** Avoid excessive force when adjusting the chair's height to prevent damage or injury.
- **Warning:** Regularly check the tightness of all chair parts and adjust if any parts are loose.
- **Warning:** The maximum weight capacity of this chair is 100 kg (220.5 lbs).
- **Warning:** Do not use this chair for elderly or patients who lack balance.

## 2. Installation Instructions

| | |
|---|---|
| **Step 1:**<br>• Remove all parts from the packaging and ensure you have all necessary tools. |  |
| **Step 2:**<br>• Connect the chair legs to the seat base according to the illustrations in the manual. |   |

| | |
|---|---|
| **Step 3:**<br>• Adjust the chair height and ensure all adjustment parts are securely fastened.<br>• Adjust the tips until the chair is parallel to the ground.<br>• Adjust the height of the chair with a push button. |  |
| **Step 4:**<br>• Confirm that all screws and fasteners are tightened, and the chair is stable before use. |  |

# 3. Usage Instructions

- **Preparation:** Ensure the chair is placed securely on a flat surface in the bathroom or shower.
- **Sitting:** Gently sit on the chair and adjust the height to suit your needs.
- **Caution:** Avoid standing or making sudden movements on the chair to prevent slipping.
- **If you are a patient:** Follow your doctor's or therapist's advice when using this chair.

# 4. Intended Use

Intended for use as a shower chair in the bathroom.

- **Indications:**
  - Suitable for users who need to sit while showering, such as elderly individuals or patients who cannot stand for long periods.
- **Contraindications:**
  - Do not use for elderly or patients who lack balance.
  - Not suitable for use outside of the bathroom or shower environment.
  - Not suitable for users exceeding the chair's maximum weight capacity.

- **Notes:**
  - Ensure the floor around the chair is dry to prevent slipping.
  - Regularly check the chair's stability and structural integrity.

## 5. Maintenance and Care

Maintenance and Care

- **Regular Checks:** Periodically check the screws and adjustment parts to ensure there are no loose or damaged components.
- **Cleaning:** Use a mild cleaner and a damp cloth to wipe the seat surface. Avoid corrosive cleaning agents.
- **Storage:** Store the chair in a dry, well-ventilated area after use, avoiding prolonged exposure to moisture.

## 6. Product Specifications

- **Product Name:** Adjustable Height Shower Chair
- **Color:** White
- **Material:** PE Plastic and Corrosion-Resistant Aluminum Frame
- **Model:** LB-BME-2601
- **Maximum Weight Capacity:** 100 kg (220.5 lbs)
- **Seat Adjustment Height:** 17.71 - 21.65 inches (45 - 55 cm)
- **Seat Dimensions:** 16 x 12 inches (40.6 x 30.5 cm)
- **Product Weight:** 1.96 kg (4.32 lbs)

## 7. Warranty Terms

- **Warranty Period:** This product comes with a 90-day warranty. If you find any quality issues or defects during the warranty period, please contact customer service promptly.
- **After-Sales Service:** For warranty service or any inquiries, please contact our customer service team.

## 8. Contact Information

**Brand Owner:** Shopper+ INC

**Brand Owner Address:** 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

**Email:** support@shopperplus.com

**Phone:** 514-631-5216

**Manufacturer:** FOSHAN DONGFANG MEDICALEQUIPMENT MANUFACTORY(LTD.)

**Manufacturer Address:** NO. 5 XINGFU RD, ZONE A, SHISHAN INDUSTRIAL PARK, NANHAIDISTRICT, FOSHANCITY, GUANGDONG, P.R. CHINA.

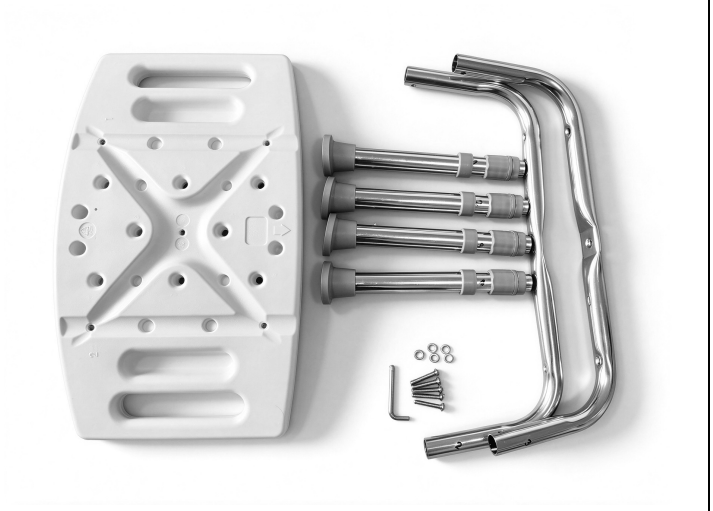
# Français

## 1. Informations de Sécurité Importantes

Informations Importantes pour la Sécurité

- **Avertissement :** Cette chaise est uniquement destinée à une utilisation dans le bain ou la douche. Évitez de l'utiliser dans d'autres environnements.
- **Avertissement :** Assurez-vous que la chaise est placée sur une surface plane pour éviter tout glissement ou basculement.
- **Avertissement :** Évitez d'ajuster la hauteur de la chaise avec une force excessive pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer des blessures.
- **Avertissement :** Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les pièces de la chaise et ajustez si des pièces sont desserrées.
- **Avertissement :** La capacité maximale de charge de cette chaise est de 100 kg (220,5 lbs).
- **Avertissement :** Interdiction d'utiliser la chaise pour les personnes âgées ou les patients manquant d'équilibre.

## 2. Instructions d'installation

| | |
|---|---|
| **Étape 1:**<br>• Retirez toutes les pièces de l'emballage et assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires. |  |

| | |
|---|---|
| **Étape 2:**<br>• Connectez les pieds de la chaise à la base du siège selon les illustrations du manuel. |   |
| **Étape 3:**<br>• Ajustez la hauteur de la chaise et assurez-vous que toutes les pièces réglables sont solidement fixées.<br>• Réglez les embouts sur les quatre pieds jusqu'à ce que la chaise soit parallèle au sol.<br>• Réglez la hauteur de la chaise avec un bouton-poussoir. |   |
| **Étape 4:**<br>• Confirmez que toutes les vis et fixations sont serrées et que la chaise est stable avant utilisation. |  |

# 3. Instructions d'Utilisation

**Préparation :** Assurez-vous que la chaise est placée de manière sécurisée sur une surface plane dans la salle de bain ou la douche.

**Asseyez-vous :** Asseyez-vous doucement sur la chaise et ajustez la hauteur selon vos besoins.

**Précautions :** Évitez de vous tenir debout ou de faire des mouvements brusques sur la chaise pour éviter les glissades.

**Si vous êtes un patient :** Suivez les conseils de votre médecin ou thérapeute lors de l'utilisation de cette chaise.

# 4. Utilisation Prévue

Destinée à être utilisée comme chaise de douche dans la salle de bain.

- **Indications :**
  - Convient aux utilisateurs qui doivent s'asseoir pendant la douche, tels que les personnes âgées ou les patients qui ne peuvent pas rester debout longtemps.
- **Contre-indications :**
  - Ne pas utiliser pour les personnes âgées ou les patients manquant d'équilibre.
  - Non adaptée pour une utilisation en dehors de la salle de bain ou de la douche.
  - Non adaptée pour les utilisateurs dépassant la capacité de charge maximale de la chaise.

  Remarques :
  - Assurez-vous que le sol autour de la chaise est sec pour éviter les glissades.
  - Vérifiez régulièrement la stabilité et l'intégrité structurelle de la chaise.

# 5. Entretien et Soins

- **Vérifications Régulières :** Vérifiez périodiquement les vis et les pièces réglables pour s'assurer qu'il n'y a pas de composants desserrés ou endommagés.
- **Nettoyage :** Utilisez un nettoyant doux et un chiffon humide pour essuyer la surface du siège. Évitez les agents nettoyants corrosifs.
- **Stockage :** Rangez la chaise dans un endroit sec et bien ventilé après utilisation, en évitant une exposition prolongée à l'humidité.

# 6. Spécifications du Produit

**Nom du Produit :** Chaise de Douche à Hauteur Ajustable

**Couleur :** Blanc

**Matériau :** Plastique PE et Cadre en Aluminium Résistant à la Corrosion

**Modèle :** LB-BME-2601

**Capacité de Charge Maximale :** 100 kg (220,5 lbs)

**Hauteur du Siège Ajustable :** 17,71 - 21,65 pouces (45 - 55 cm)

**Dimensions du Siège :** 16 x 12 pouces (40,6 x 30,5 cm)

**Poids du Produit :** 1,96 kg (4,32 lbs)

# 7. Conditions de Garantie

- **Période de Garantie :** Ce produit bénéficie d'une garantie de 90 jours. Si vous constatez des problèmes de qualité ou des défauts pendant la période de garantie, veuillez contacter le service client rapidement.
- **Service Après-Vente :** Pour le service de garantie ou toute question, veuillez contacter notre équipe de service client.

# 8. Informations de Contact

**Propriétaire de la Marque :** Shopper+ INC

**Adresse du Propriétaire de la Marque :** 2110 52E AV, LACHINE, QUEBEC, H8T 2Y3, MONTREAL, CANADA

**Email :** support@shopperplus.com

**Téléphone :** 514-631-5216

**Fabricant :** FOSHAN DONGFANG MEDICALEQUIPMENT MANUFACTORY(LTD.)

**Adresse du Fabricant :** NO. 5 XINGFU RD, ZONE A, SHISHAN INDUSTRIAL PARK, NANHAIDISTRICT, FOSHANCITY, GUANGDONG, P.R. CHINA.